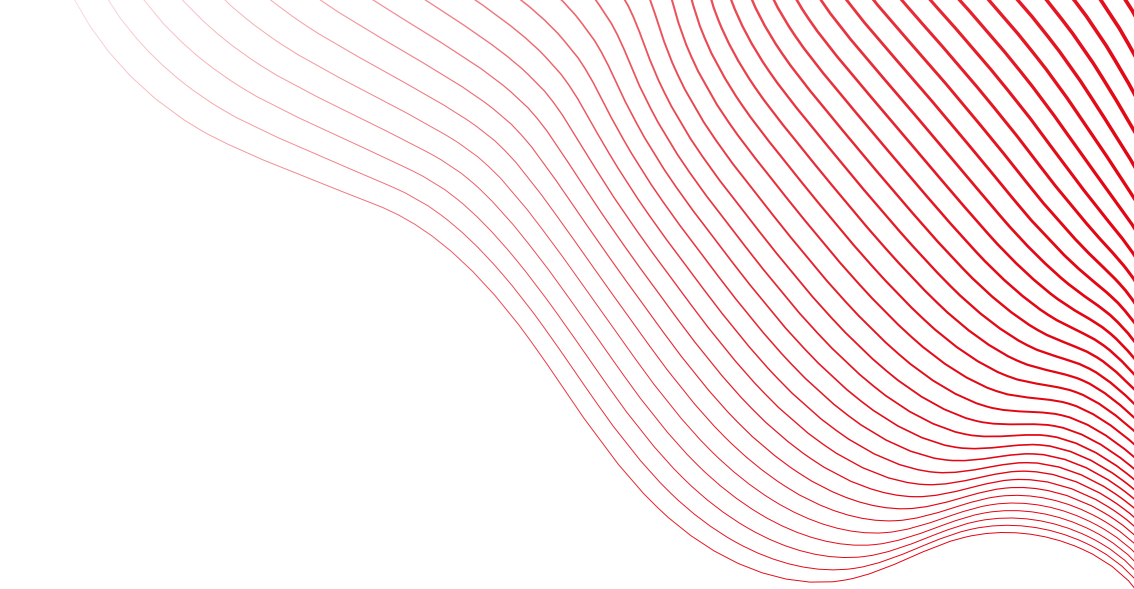




Spring[®]

Инструкции по применению
Медицинские компрессионные чулки
fino · classico · vigento

Уважаемый пользователь!

Уделите несколько минут для чтения и внимательно ознакомьтесь с информацией об изделии. Это позволит получить максимальный эффект от компрессионной терапии!

Назначение

Компрессионные чулки применяются для терапии флебологических заболеваний ног. В зависимости от показаний используются различные изделия.

Принцип действия медицинских компрессионных чулок

Благодаря подбору параметров изделия под определенные показания и контролируемому давлению увеличивается скорость оттока крови, улучшается микроциркуляция в ткани.

Важные указания

Перед началом использования компрессионных чулок проконсультируйтесь со своим врачом. Ежедневное использование и регулярное врачебное наблюдение обеспечат успех лечения! Специалисты, занимающиеся продажей чулок, должны иметь медицинское образование. В специализированном магазине вас также проконсультируют, как правильно надевать компрессионные чулки. Если при ношении чулок возникнет острая боль в ногах или раздражения кожи, нужно немедленно обратиться к врачу. Кожные реакции в области резинок можно предотвратить, слегка изменяя положение резинок несколько раз в течение дня. Если чулки планируется носить в сочетании с другими медицинскими средствами, проконсультируйтесь с врачом. Вся наша продукция проходит контроль в рамках комплексной системы обеспечения качества. Если, несмотря на все наши усилия, у вас возникнут претензии к качеству, обращайтесь в ваш магазин. При обнаружении дефектов не проводите ремонт своими силами, а верните чулки в магазин, в котором они приобретались. Узелки в волокне, которые могут образоваться вследствие трения о другие предметы одежды, не влияют на качество чулок.

Указания по уходу

Изделие пригодно для немедленного использования. Перед первым ношением его рекомендуется постирать. После этого стирайте его ежедневно вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки. Стирайте чулки отдельно с использованием нейтрального моющего средства без кондиционера-ополаскивателя (Spring® специальные моющие средства) при температуре не выше 40 °C и хорошо полоскайте. Возможен щадящий отжим чулок в центрифуге, не допускается отжим с выкручиванием. Сушить чулки следует на открытом воздухе или в сушильной машине в щадящем режиме, не допускается сушка на нагревательных приборах или под прямыми солнечными лучами. Запрещается гладить чулки. Для сохранения эффективности чулок не используйте химические чистящие средства, бензин или кондиционер-ополаскиватель. Эти вещества разъедают трикотажное полотно. Компрессионные чулки по большей части нечувствительны к жирам или маслам, однако следует избегать их контакта с мазями. Чулки с резинками, имеющими силиконовое покрытие, не должны контактировать с растворителями, мазями, увлажняющими моющими лосьонами и кремами для тела. В противном случае способность резинок к сцеплению

может быть необратимо нарушена (волосистой покров на ногах и сухая кожа также могут ограничить функциональные свойства резинок). Храните чулки в сухом, защищенном от солнца и жары месте, по возможности в оригинальной упаковке. Подкладка, которая прилагается к чулкам с открытым носком, изготовлена из 100% полиэстера.

Стирать с изнанки, не использовать кондиционер-ополаскиватель!

- Деликатная стирка.
- Не отбеливать.
- Щадящая сушка.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.

Состав материала

Полиамид 67 %
Эластан 33 %

Показания к применению (см. также Рекомендации по медицинской компрессионной терапии AWMF 037/005, редакция 12/18):

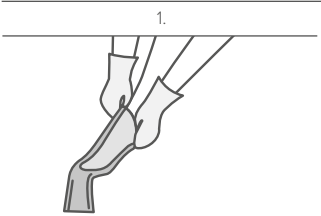
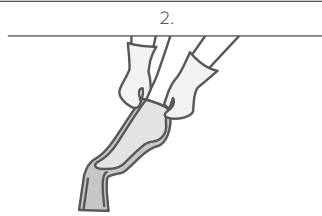
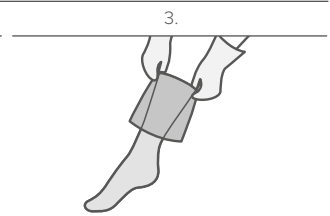
- улучшение венозных симптомов и качества жизни при хронических заболеваниях вен;
- профилактика и терапия венозных отеков;
- профилактика и терапия венозных изменений кожи;
- экзема и пигментация;
- дерматопосклероз и белая атрофия кожи;
- терапия и уменьшение боли при венозной трофической язве, в том числе профилактика рецидивов;
- терапия артериальных и венозных трофических язв (См. «Противопоказания»);
- варикозное расширение вен;
- начальная фаза после терапии варикозного расширения вен;
- функциональная венозная недостаточность;
- венозная мальформация;
- тромбоз вен;
- состояние после тромбоза;
- посттромботический синдром;
- профилактика тромбоза у мобильных пациентов;
- лимфедема;
- отеки при беременности;
- посттравматические/послеоперационные отеки;
- циклические идиопатические отеки;
- липедема 2-й стадии и выше;
- застойные состояния вследствие неподвижности (артрогенный конгестивный синдром, парезы и частичные парезы конечностей);
- отеки, обусловленные родом занятий (стоячая, сидячая работа);
- медикаментозные отеки, если невозможен перевод на другие лекарственные препараты;
- ожирение с функциональной венозной недостаточностью;
- воспалительные дерматозы ног;
- тошнота, вертиго и жалобы на застой при беременности;
- состояние после ожогов;
- лечение рубцов.

Советы по надеванию

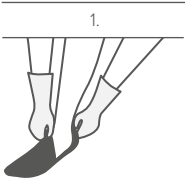
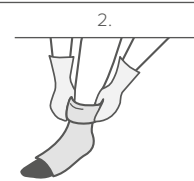
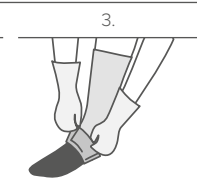
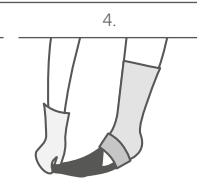
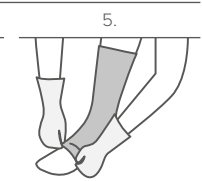
Надевайте чулки сразу после утреннего подъема, пока на ногах еще нет отеков. Не тяните компрессионный чулок вверх за верхний край или за край резинки, а надевайте его, ведя руками снизу вверх. Для облегчения надевания и бережного обращения с трикотажным полотном рекомендуется использовать бытовые резиновые перчатки.

Украшения и длинные ногти на руках могут повредить чулок. Также регулярно ухаживайте за стопами и носите удобную обувь. Спросите в специализированном медицинском магазине о перчатках BELSANA с рельефной поверхностью и об удобных приспособлениях для надевания и снятия компрессионных чулков с открытым и закрытым носком..

Руководство по надеванию, закрытый мысок

		
Для надевания выверните чулок наизнанку до стопы. Наденьте носочную часть на пальцы ноги, затем — на подъем.	Теперь осторожно натяните верхнюю часть чулка на пятку. При этом старайтесь не тянуть чулок за верхний край или за край резинки.	Наденьте оставшийся чулок равномерно вверх, не растягивая его. В завершение расправьте чулок на ноге, чтобы он прилегал без складок.

Руководство по надеванию, открытый мысок

				
Для облегчения надевания компрессионных чулок с открытым мыском воспользуйтесь входящим в комплект вспомогательным приспособлением. Наденьте вспомогательное приспособление на стопу, чтобы оно едва заходило на пятку.	Теперь натяните чулок таким образом, чтобы пяточная часть правильно села на свое место. Вспомогательное приспособление позволяет сделать это очень просто.	Чтобы снять вспомогательное приспособление, подверните назад нижнюю часть чулка.	Затем стяните вспомогательное приспособление вперед с кончиков пальцев.	После этого следует снова отвернуть нижнюю часть чулка в верное положение. Затем наденьте оставшийся чулок равномерно вверх, не растягивая его. В завершение расправьте чулок на ноге, чтобы он прилегал без складок.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания:

- прогрессирующее облитерирующее заболевание периферических артерий;
- декомпенсированная сердечная недостаточность;
- септические флебиты;
- синий болевой флебит.

Относительные противопоказания:

- мокнущие дерматозы;
- непереносимость материалов, входящих в состав компрессионных чулок;
- тяжелые расстройства чувствительности конечностей;
- прогрессирующая периферическая нейропатия (например, при сахарном диабете);
- хронические полиартриты.

В случае несоблюдения данных противопоказаний мы снимаем с себя всякую ответственность.

Риски и побочные действия

В случае чувствительной кожи под компрессионными чулками могут возникнуть зуд и проблемы с кожей. В связи с этим рекомендуется адекватный уход за кожей.

При следующих симптомах необходимо сразу снять чулки и обсудить продолжение терапии с врачом: посинение или побеление пальцев ног, дискомфорт и ощущение онемения, усиливающиеся боли, одышка и обильное потение, острые ограничения двигательных функций.

Срок гарантии

Срок годности медицинских компрессионных чулок при

надлежащих условиях хранения составляет 3 года. К нему добавляется срок службы, который при регулярном использовании и должном уходе составляет максимум 6 месяцев. По истечении этого срока действие гарантии на продукцию прекращается. Принципиально гарантия не распространяется на недостатки, вызванные естественным износом или неосторожным обращением. Под неосторожным обращением также понимается внесение дополнительных изменений в изделие кем-либо помимо производителя. Незначительные отклонения в цвете, которые могут возникнуть в результате индивидуального процесса окрашивания, не считаются дефектом. Соответствующий товар, таким образом, не подлежит обмену и возврату. Изделие предназначено для использования одним пациентом. Если оно передается для повторного использования другим лицам, гарантия производителя утрачивает силу.

Утилизация

По окончании периода использования изделие необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Обязательное уведомление

На основании требований законодательства пациенты и пользователи обязаны немедленно уведомить производителя и национальные компетентные органы (в Германии это Институт VfAгМ) о связанных с изделием серьезных инцидентах, которые привели к существенному ухудшению здоровья или смерти или могли бы привести к этому.

Таблица размеров fino

		1	2	3	4	5
A-T/U Продольные мерки IK короткие: 69 - 78 cm длинные: 78,1 - 88 cm	cT/U	75 - 100	80 - 110	85 - 120	95 - 130	100 - 135
	cH/U	90 - 115	95 - 125	100 - 140	105 - 145	115 - 155
A-T Продольные мерки IK короткие: 69 - 78 cm длинные: 78,1 - 88 cm	cT	70 - 90	75 - 105	80 - 110	90 - 120	95 - 125
	cH	90 - 105	95 - 115	100 - 130	105 - 135	115 - 145
	cG (A-T)	46 - 67	49 - 71	52 - 74	56 - 79	58 - 84
A-G Продольные мерки IG короткие: 65 - 74 cm длинные: 74,1 - 84 cm	cG	46 - 56	49 - 60	52 - 63	56 - 67	58 - 72
	cF	39 - 53	41 - 56	45 - 60	46 - 62	47 - 64
	cE	31 - 40	35 - 43	37 - 47	39 - 49	41 - 52
A-D Продольные мерки ID короткие: 34 - 38 cm длинные: 38,1 - 43 cm	cD	28 - 35	30 - 38	33 - 41	35 - 44	37 - 47
	cC	29 - 36	32 - 40	34 - 43	37 - 45	39 - 48
	cB1	23 - 29	25 - 32	27 - 34	30 - 37	33 - 40
фут	cB	19 - 20	20,1 - 22	22,1 - 24,5	24,6 - 27	27,1 - 30
	cY	28 - 32	29 - 34	30 - 35	32 - 36	33 - 38
	cA	19 - 23	20 - 24	21 - 25	22 - 26	23 - 27
Длина стопы, с открытым мыском (длина A – Y): 15 - 17,5 cm		Длина стопы, с мыском (размер обуви) короткие: 22,5 - 25,9 cm (размер обуви 36 - 40) длинные: 26,0 - 29,5 cm (размер обуви 41 - 45)				

Таблица размеров classico & vigento

		1	1+X A-D	1+X A-G	2	2+X A-D	2+X A-G	3	3+X A-D	3+X A-G	4	4+X A-D	4+X A-G	5	5+X A-D	5+X A-G	6	6+X A-D	6+X A-G
A-T/U Продольные мерки IK короткие: 69 - 78 cm длинные: 78,1 - 88 cm	cT/U (classico)	70 - 92			75 - 97			83 - 105			90 - 110			95 - 120			100 - 125		
	cH/U (classico)	80 - 110			87 - 120			95 - 125			100 - 130			110 - 140			115 - 150		
A-T A-G/Ht (vigento) Продольные мерки IK короткие: 69 - 78 cm длинные: 78,1 - 88 cm	cT	62 - 84			67 - 89			74 - 98			80 - 102			85 - 108			90 - 115		
	cH	71 - 95			76 - 100			84 - 116			90 - 127			98 - 137			105 - 148		
	cG (A-T & A-G/Ht)	42 - 55			44 - 58			48 - 62			50 - 67			53 - 73			56 - 80		
A-G Продольные мерки IG короткие: 65 - 74 cm длинные: 74,1 - 84 cm	cG (с резинкой)	44 - 53		51 - 60	46 - 56		54 - 63	50 - 60		58 - 68	53 - 64		63 - 74	57 - 70		67 - 79	61 - 80		71 - 88
	cF	39 - 47		47 - 55	41 - 50		49 - 58	45 - 54		53 - 62	46 - 57		56 - 66	47 - 60		58 - 69	49 - 62		59 - 71
	cE	28 - 36		28 - 36	32 - 40		32 - 40	34 - 42		34 - 42	36 - 46		36 - 46	38 - 49		38 - 49	40 - 52		40 - 52
A-D Продольные мерки ID короткие: 34 - 38 cm длинные: 38,1 - 43 cm	cD	29 - 32	32 - 36		30 - 35	34 - 40		32 - 38	36 - 43		33 - 42	39 - 48		35 - 45	41 - 51		37 - 48	43 - 54	
	cC	28 - 33	32 - 37		31 - 36	35 - 41		32 - 39	38 - 45		35 - 43	40 - 49		37 - 46	42 - 52		39 - 49	44 - 55	
	cB1	24 - 27	25 - 29		25 - 29	27 - 31		27 - 31	29 - 33		29 - 33	32 - 36		31 - 36	34 - 39		35 - 40	38 - 43	
	cB	19,5 - 20			20,1 - 22			22,1 - 24,5			24,6 - 27			27,1 - 30			30,1 - 33		
Piede	cY	26 - 30			27 - 32			29 - 34			30 - 37			32 - 39			33 - 41		
	cA	19,5 - 20			20 - 22			22 - 24,5			24,5 - 27			27 - 30			30 - 33		

Длина стопы, с открытым мыском (длина A – Y): 15 - 17,5 cm • Длина стопы, с мыском (размер обуви): короткие: 22,5 - 25,9 cm (размер обуви 36 - 40) длинные: 26,0 - 29,5 cm (размер обуви 41 - 45)

Apothekenvertrieb:

BELSANA Medizinische Erzeugnisse

Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH

Laubanger 20, D-96052 Bamberg

service@belsana.de

Spring[®]medical

Eine Marke der



Ofa Bamberg GmbH,
Laubanger 20, D-96052 Bamberg



STANDARD
100
95.0.1594
Hohenstein
www.oeko-tex.com

